

Elastiskt tubbandage för fixering av förband

Tubifast™ 2-Way Stretch™ är ett elastiskt tubbandage med elasticitet både på längden och på bredden¹. Denna unika förmåga skapar full rörlighet och extra bekvämlighet för patienten. Det är idealiskt för fixering av förband och för att skydda och täcka huden. Tubbandaget kan även användas som skydd under gips. Tubifast 2-Way Stretch gör det lätt att fixera förband utan tejp eller säkerhetsnålar. Det är enkelt och går snabbt att använda, med mindre risk för friktion och fibersläpp² än traditionellt tubbandage.

Snabb och enkel att använda: klipp helt enkelt till önskad storlek och trä över förbandet för en jämn passform utan kompression.

Finns i fem färgkodade storlekar vilka är utformade för att smidigt passa över samtliga kroppsdelar oberoende storlek eller form.

Tubifast 2-Way Stretch håller säkert och bekvämt förbandet på plats utan kompression.

Tubbandage gör att varken tejp eller säkerhetsnålar behövs.


Snabbheten och enkelheten i användandet gör att risken för smittspridning minskar.

Tubifast 2-Way Stretchs elasticitet både på längden och på bredden ger patienten full rörlighet och hög bekvämlighet¹

Fransar mindre, vilket reducerar risken för att få fibrer i såret².



Så här använder du Tubifast 2-Way Stretch

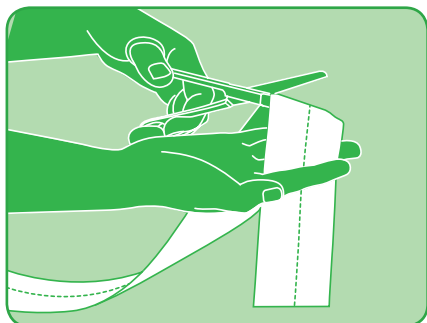

Välj rätt bredd på tubbandaget med hjälp av färgkodningen och klipp därefter till önskad längd.



Applicera sedan Tubifast 2-Way Stretch över det aktuella området



Placera Tubifast 2-Way Stretch så att förbandet täcks. För mer avancerade appliceringar finns det en appliceringsguide med både text och illustrationer.

Hur fungerar Tubifast 2-Way Stretch

Tubifast 2-Way Stretch är tillverkad av viskos och har tunna elastantrådar invävda i tyget både på längden och på bredden för att skapa elasticitet åt båda håll. Tubifast 2-Way Stretch håller kvar förbandet säkert och bekvämt utan kompression och utan att behöva tejp eller säkerhetsnålar. Genom att det är elastiskt åt två håll får patienten full rörelsefrihet och extra komfort. Tubifast 2-Way Stretch finns i fem storlekar, utformade att passa över samtliga kroppsdelar oberoende form eller storlek. De olika storlekarna är lätta att identifiera med hjälp av den färgkodning som är instwickad i bandaget. Det är enkelt och går snabbt att använda: klipp helt enkelt till önskad storlek och trä över förbandet för en jämn och bekväm passform utan kompression.

Fördelar med Tubifast 2-Way Stretch

- Tubifast 2-Way Stretch fixerar förband på ett säkert och bekvämt sätt utan kompression.
- Genom att ha elasticitet både på längden och på bredden får patienten full rörelsefrihet och extra komfort.
- Snabbt och enkelt att använda: klipp helt enkelt till önskad storlek och trä över förbandet för en jämn och bekväm passform utan kompression.
- Finns i varierande storlekar som är utformade att passa alla kroppsdelar, stora som små, och genom färgkodningssystemet går det snabbt och enkelt att identifiera.
- Genom att det fransar mindre reduceras risken för att få fibrer i såret².

Användningsområden

Tubifast 2-Way Stretch kan användas som ett fixeringsförband och för att skydda huden på alla delar av kroppen. Som tubförband kan det även effektivt användas som skydd under gips. Tack vare sin tubkonstruktion och att det stretchar både på längden och på bredden är Tubifast 2-Way Stretch särskilt lämplig när det gäller att fixera förband på annars svårbandagerade delar av kroppen, exempelvis på hälar eller amputationsstumpar.

Tubifast 2-Way Stretch sortiment

(Tubifast 2-Way Stretch levereras enstykföropackade)

Produkt	Bredd x längd	Omkrets	Art. nr	Avd. fp	Transp. fp
RÖD – Liten Små kroppsdelar	3,5 cm x 1 m	8–15 cm	2480	12	36
	3,5 cm x 10 m	8–15 cm	2434	1	20
GRÖN – Mellan Små och mellanstora kroppsdelar	5 cm x 1 m	10–25 cm	2481	12	36
	5 cm x 10 m	10–25 cm	2436	1	24
BLÅ – Stor Stora kroppsdelar	7,5 cm x 1 m	20–45 cm	2482	12	36
	7,5 cm x 10 m	20–45 cm	2438	1	30
GUL – Extra stor Extra stora kroppsdelar, huvud och barns bål	10,75 cm x 1 m	35–65 cm	2483	12	36
	10,75 cm x 10 m	35–65 cm	2440	1	12
LILA Storvuxnas bål	20 cm x 1 m	60–130 cm	2479	12	48
	20 cm x 10 m	60–130 cm	2444	1	15



Innehåll Viskos, Elastan och Polyamid

Tvättinstruktioner 40°

Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
031-722 30 00
www.molnlycke.se
The Mölnlycke Health Care name and logo and Tubifast™ 2-Way Stretch™ are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.



1. Publicerad data visar att Tubifast™ 2-Way Stretch™ överträffar minirekommendationerna för horisontell elasticitet när det gäller att sitta, böja och flexa. Physical testing of textiles B.P. Saville Woodhead Publishing 1999.
2. Data på fil.