


# BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml, 3-komponent spruta



- Glasklar plast för kontroll av innehåll
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering
- Silikonbehandlad för jämn och mjuk gång
- Ergonomiskt formad kolvstång ger säkert grepp
- Kolvstopp hindrar att kolvstången dras ut
- Dubbla kolvringar förhindrar läckage bakåt
- Latexfri packning eliminerer risken för allergiska reaktioner

## Sprutor med löstagbar kanyl

Sprutor med löstagbar kanyl ger alla fördelar som BD Plastipak™ sprutan och BD Microlance™ 3 kanylen har. Dessutom underlättas injektionen genom att ett minskat antal handhavandemoment krävs

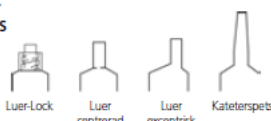

## Sprutor utan kanyl

Storlek ml	Fattning/Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
2/2,5	Luer/Centrerad	0,1	100/800	300185
5	Luer/Centrerad	0,2	100/400	302187
10	Luer/Excentrisk	0,5	100/400	302188
3	Luer-Lok™/Centrerad	0,1	200/800	309658
5	Luer-Lok™/Centrerad	0,2	125/500	309649
10	Luer-Lok™/Centrerad	0,2	100/400	300912

## Sprutor med löstagbar kanyl

Storlek ml	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
2/2,5	25 x 5/8	0,5 x 16	Orange	100/800	300190
2/2,5	23 x 1	0,6 x 25	Blå	100/800	300189
2/2,5	22 x 1 1/4	0,7 x 30	Svart	100/800	300188
2/2,5	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Grön	100/800	300187
3	25 x 1	0,5 x 25	Orange	100/800	309581
5	22 x 1 1/4	0,7 x 30	Svart	100/400	308062
5	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Grön	100/400	308063
10	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Grön	100/400	308027

### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
 Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
 Ytbehandling: Silikonolja  
 Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
 Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
 Lim: Epoxy resin  
 Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Papper  
 Transparent plastfilm (polyetylen/polyamid)  
 Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid (sprutor med luerfattning/sprutor med kanyl)  
 Strålsterilisering (sprutor med Luer-Lok™ fattning)



5 år

CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC  
 (Spruta utan kanyl: Klass I)  
 (Spruta med kanyl: Klass IIa)

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
 Box 47204  
 100 74 STOCKHOLM  
 Tel: 08 - 77 55 100  
 www.bd.com